


# CORPO CENTRALE

Cod. 01.0870.73

CORPI CENTRALI PER SOXHLET, ML 250, CONO F. 55/45 - CONO MASCHIO NS 29/32

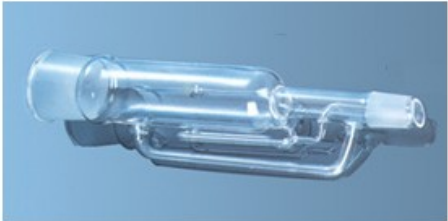

## Descrizione

L 'estrattore di Soxhlet viene usato nella determinazione dei grassi liberi e totali negli alimenti, analisi dei pesticidi, dei legni e delle plastiche. L' estrazione avviene riscaldando il solvente contenuto nel matraccio, dopo che il campione è stato posto nel ditale filtrante nell' interno dell' estrattore. I vapori sviluppati dal calore salgono lungo il tubo laterale, entrano nel corpo centrale per poi salire nel refrigerante. Nel refrigerante si condensano e ricadono allo stato liquido nel ditale, riempiendo mano a mano l' estrattore fino al livello del sifone, il quale a sua volta scaricherà il liquido nel matraccio. Corpo centrale, raccordo conico inferiore NS 29/32

## Dati Tecnici

|                         |       |
|-------------------------|-------|
| Capacità (ml)           | 250   |
| Capacità matraccio (ml) | 500   |
| Cono (NS)               | 55/45 |

## Varianti

| Codice     | Prodotto                               | Capacità (ml) | Capacità matraccio (ml) | Cono (NS) |
|------------|----------------------------------------|---------------|-------------------------|-----------|
| 01.0870.38 | ESTRATTORE SOXHLET :<br>CORPO CENTRALE | 30            | 50                      | 29/32     |
| 01.0870.51 | CORPO CENTRALE                         | 70            | 100                     | 34/35     |
| 01.0870.57 | CORPO CENTRALE                         | 100           | 250                     | 45/40     |
| 01.0870.64 | CORPO CENTRALE                         | 150           | 250                     | 45/40     |

|            |                |      |      |       |
|------------|----------------|------|------|-------|
| 01.0870.69 | CORPO CENTRALE | 200  | 500  | 55/45 |
| 01.0870.73 | CORPO CENTRALE | 250  | 500  | 55/45 |
| 01.0870.79 | CORPO CENTRALE | 500  | 1000 | 60/46 |
| 01.0870.88 | CORPO CENTRALE | 1000 | 2000 | 71/51 |